



LagoMedical GmbH



B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

| PROPULSÉ PAR LES
PARTENARIATS



Qui est B-WISE ?

Régional & Global

La marque B-Wise est une alliance internationale de fournisseurs de produits de soins des plaies, profondément ancrés dans leurs régions respectives. Ils sont reliés par :

- un portefeuille de produits commun,
- des accords d'achats conjoints,
- une chaîne d'approvisionnement mondiale commune.



B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

Notre MISSION

Produits de qualité & prix attractifs

Une gamme de soins des plaies soigneusement sélectionnée, de haute qualité, offrant un excellent rapport qualité-prix.

Notre GAMME

La bonne qualité, l'efficacité clinique et le bénéfice élevé pour le patient sont la ligne directrice de notre gamme. Ces critères doivent être remplis sans compromis et constituent la base de notre assortiment.

Foam Silicone


Les avantages d'une structure en mousse absorbante multicouche de haute qualité, associés aux bénéfices supplémentaires d'une couche de contact avec la plaie en silicone, qui assure des soins doux pour les peaux fragiles et sensibles tout en garantissant l'absorption des exsudats à viscosité élevée.

- Avec bordure / Sans bordure (Border / Non-Border)



Gelling Fiber Extra

Très bonne absorption et rétention, tout en piégeant les germes dans le pansement. Celui-ci gonfle rapidement et forme un gel semi-transparent qui prévient les fuites et la macération. En même temps, l'environnement humide optimal, favorable à la cicatrisation, est maintenu. Version renforcée pour une adaptation et un retrait facilités.

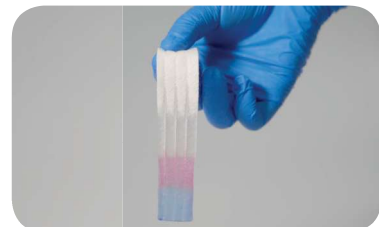

Super-Absorbent

Très forte absorption des exsudats – très forte rétention. Apporte des avantages cliniques supplémentaires grâce à la fixation des bactéries et des MMP dans le noyau superabsorbant.

- Standard – Sans bordure
- Extra (absorption très élevée) – Sans bordure
- Extra Silicone (absorption très élevée avec couche de contact en silicone) – Sans bordure



Charcoal Super-Absorbent

L'élimination efficace des odeurs de plaie signifie une amélioration de la qualité de vie des patients. Ce pansement au charbon actif est la solution idéale pour les plaies malodorantes tout en offrant tous les avantages d'un pansement superabsorbant.

- Sans bordure



Lipotul Lipo-Colloid Net


Assure un environnement humide de cicatrisation pendant la durée du port et un retrait atraumatique et indolore. Conçu avec des pores suffisamment larges pour permettre l'écoulement des exsudats très visqueux vers le pansement secondaire.



Silicone Interface (1-sided)

Pansement doux en silicone enduit sur une seule face, permettant un changement atraumatique. De larges pores assurent une gestion efficace des exsudats très visqueux.



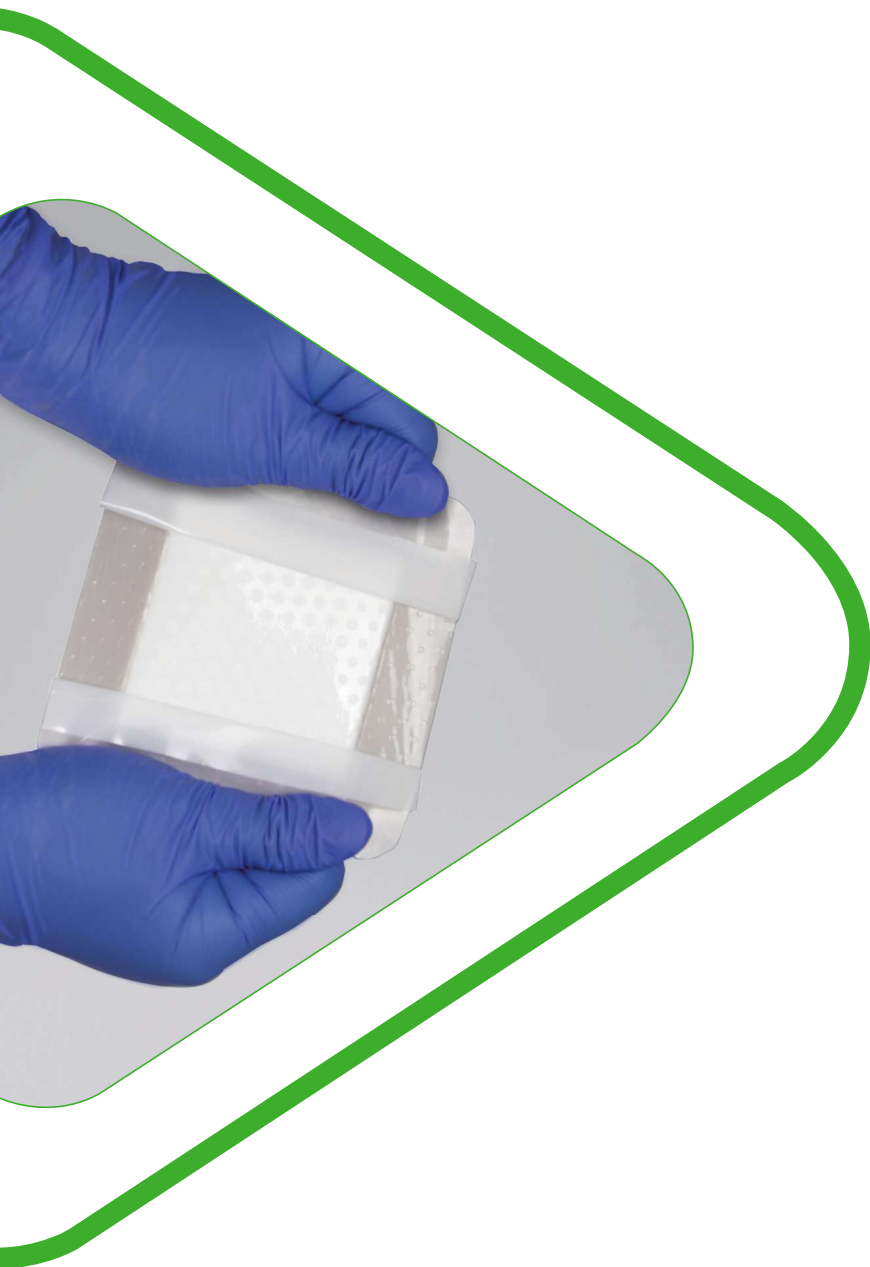

B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE


FOAM SILICONE




FOAM SILICONE

Excellente gestion de l'exsudat
et douceur pour la peau sensible.

Version avec bordure

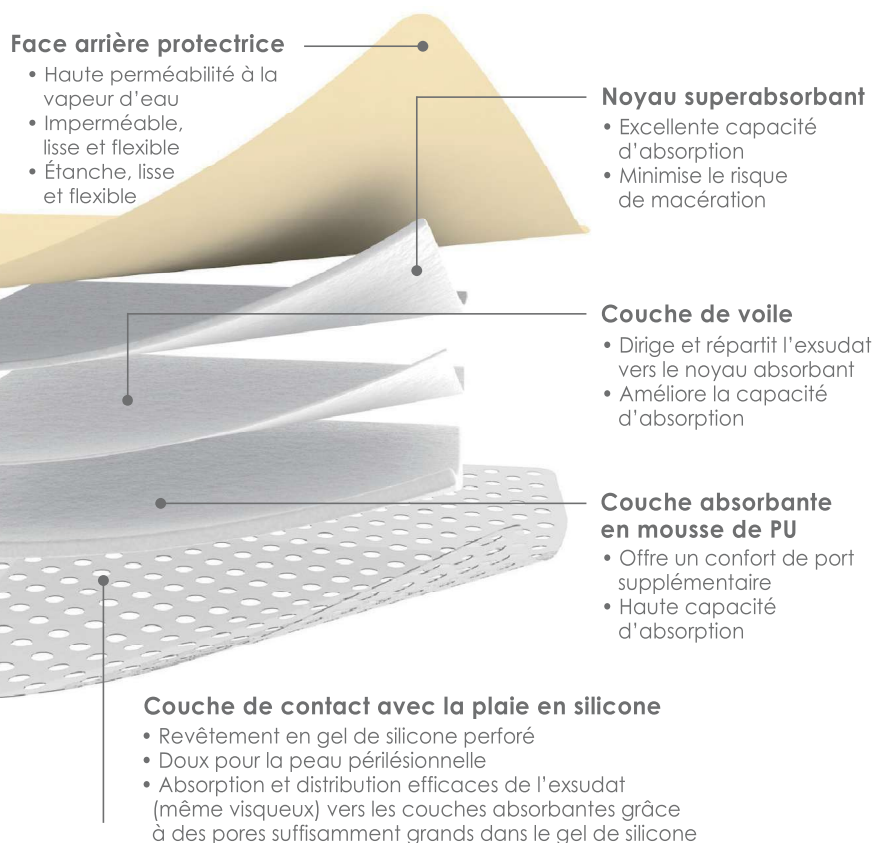

VERSION SANS BORDURE

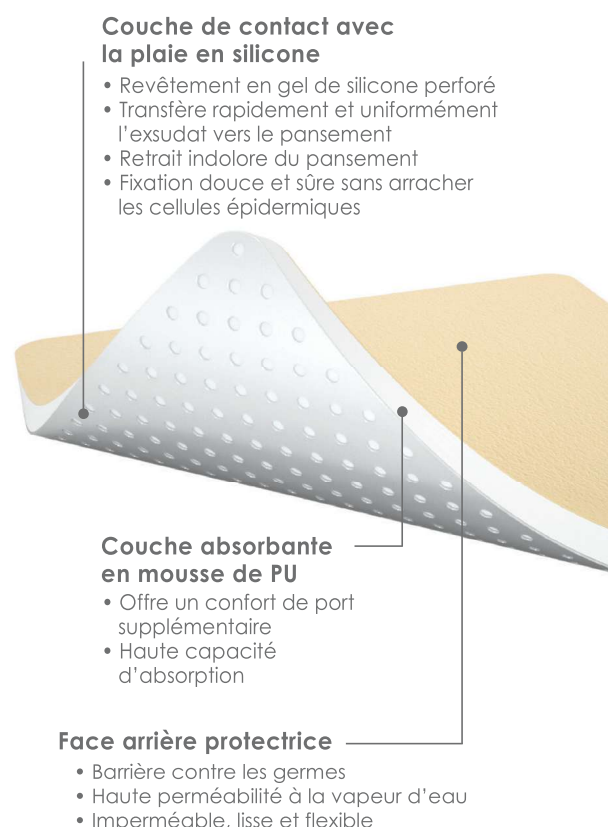

INDICATIONS

Aspect de la plaie :  

Exsudat:
faible – élevé



Indications:

- Ulcères de pression
- Ulcères diabétiques
- Plaies chirurgicales
- Sites de prélèvement de greffe cutanée
- Ulcères de jambe (UCV, UCM, UCA)
- Brûlures jusqu'au 2e degré

APERÇU DU PRODUIT

Type	N° art.	Taille cm	pcs/boîte	MiGel Nr.
Sans bordure	SF075075	7,5 x 7,5	10	35.05.03.02.1
	SF100100	10 x 10	10	35.05.03.03.1
	SF150150	15 x 15	10	35.05.03.04.1
	SF200200	20 x 20	10	35.05.03.06.1



B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE


GELLING FIBER
EXTRA



GELLING FIBER EXTRA

Haute absorption, rétention et liaison des germes.
Version renforcée pour un retrait facile.

B-WISE GELLING FIBER EXTRA gonfle rapidement et forme un gel semi-transparent qui empêche les fuites et la macération. Dans le même temps, il maintient l'environnement humide optimal pour la cicatrisation. Version renforcée pour un ajustement et un retrait faciles.

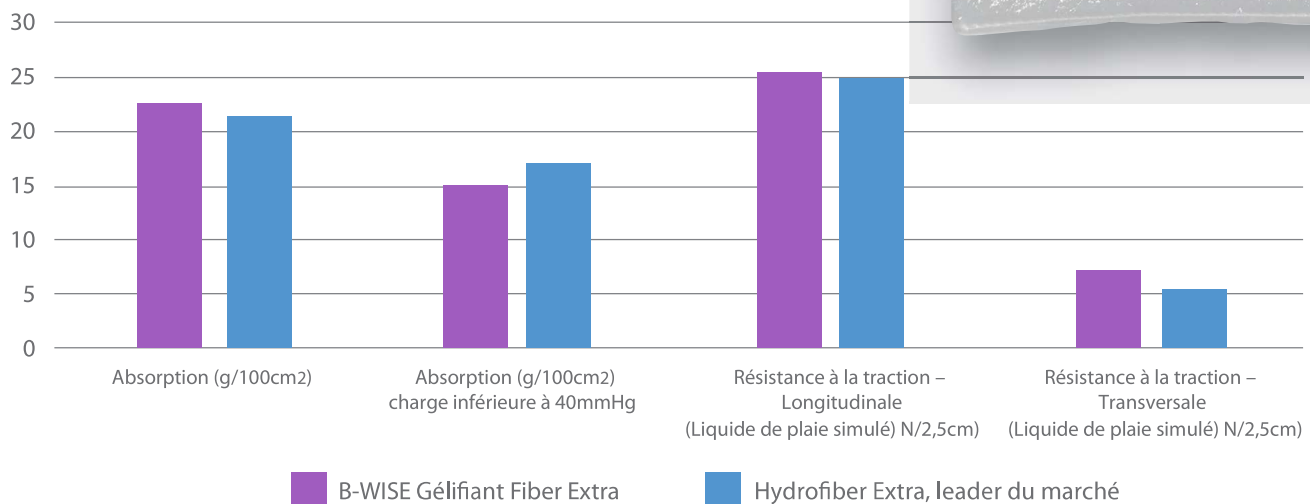

INDICATIONS

Aspect de la plaie



Exsudat:
faible – moyen



Indications

- Ulcères de pression
- Ulcères diabétiques
- Ulcères de jambe (UCV, UCM, UCA)
- Brûlures jusqu'au 2e degré
- Plaies chirurgicales (par ex. plaies postopératoires avec cicatrisation secondaire et sites de prélèvement de greffe cutanée)

Codes produit

N° art.	Taille cm	pcs/boîte	MiGel Nr.
GFR020450	2 x 45	10	35.05.07.09.1
GFR050050	5 x 5	10	35.05.07.01.1
GFR100100	10 x 10	10	35.05.07.02.1
GFR150150	15 x 15	10	35.05.07.04.1



B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

SUPERABSORBENT
EXTRA /
EXTRA SILICONE



SUPERABSORBENT EXTRA / EXTRA SILICONE

Excellente absorption et rétention des exsudats de plaie – même sous compression.

Couche de protection et de support au dos

- Résistante à l'eau
- Barrière contre la pénétration des bactéries

Cœur superabsorbant


- Très forte absorption et rétention même sous compression
- Lie les bactéries et les MMP

Couche de transport

- Assure un drainage rapide et efficace de l'exsudat vers le cœur absorbant. Elle garantit également un confort de port agréable.

Couche de contact en silicone avec la plaie (uniquement pour la version silicone)

- Retrait et repositionnement atraumatiques même sur une peau sensible

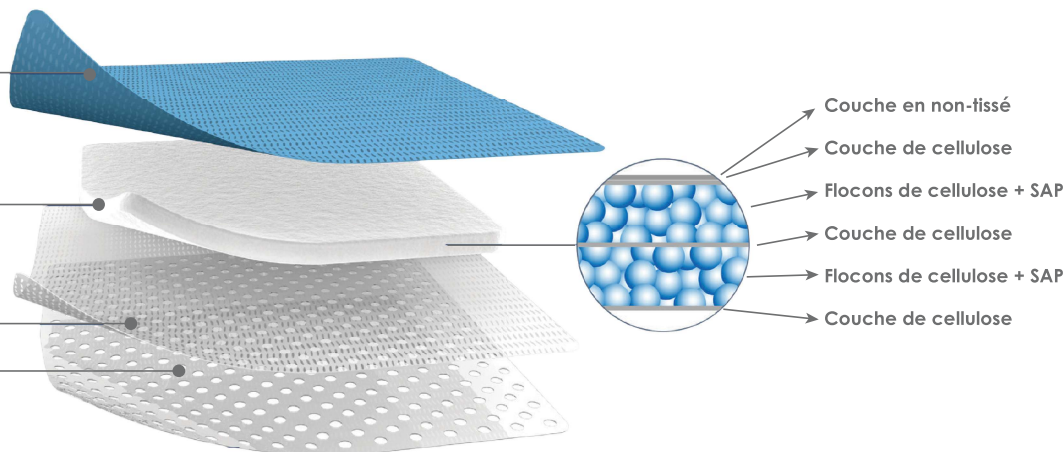

B-WISE SUPERABSORBENT EXTRA / SUPERABSORBENT EXTRA SILICONE ont été développés pour gérer de très grandes quantités d'exsudat. Le liquide est absorbé et retenu dans le noyau superabsorbant – même sous compression. Les MMP (métalloprotéinases matricielles) et les bactéries sont piégées dans le noyau superabsorbant et leur réduction contribue à une cicatrisation efficace de la plaie. Grâce à un noyau absorbant composé de SAPs (polymères superabsorbants) et de fibres naturelles, le pansement présente d'excellentes capacités d'absorption même en présence d'exsudats très visqueux.

INDICATIONS

Aspect de la plaie



Exsudat: faible – moyen



Niveaux d'exsudat Extra Silicone: Faible – Très élevé




Indications:

- Ulcères diabétiques
- Ulcère de jambe (UV, UM, UA)
- Escarres de décubitus
- Brûlures du 2. degré
- Troubles de cicatrisation secondaire

Codes produit

N° art.	Taille cm	pcs/boîte	MiGel Nr.
SAX100100	10 x 10	10	35.05.05.03.1
SAX100200	10 x 20	10	35.05.05.04.1
SAX150150	15 x 15	10	35.05.05.04.1
SAX200200	20 x 20	10	35.05.05.05.1

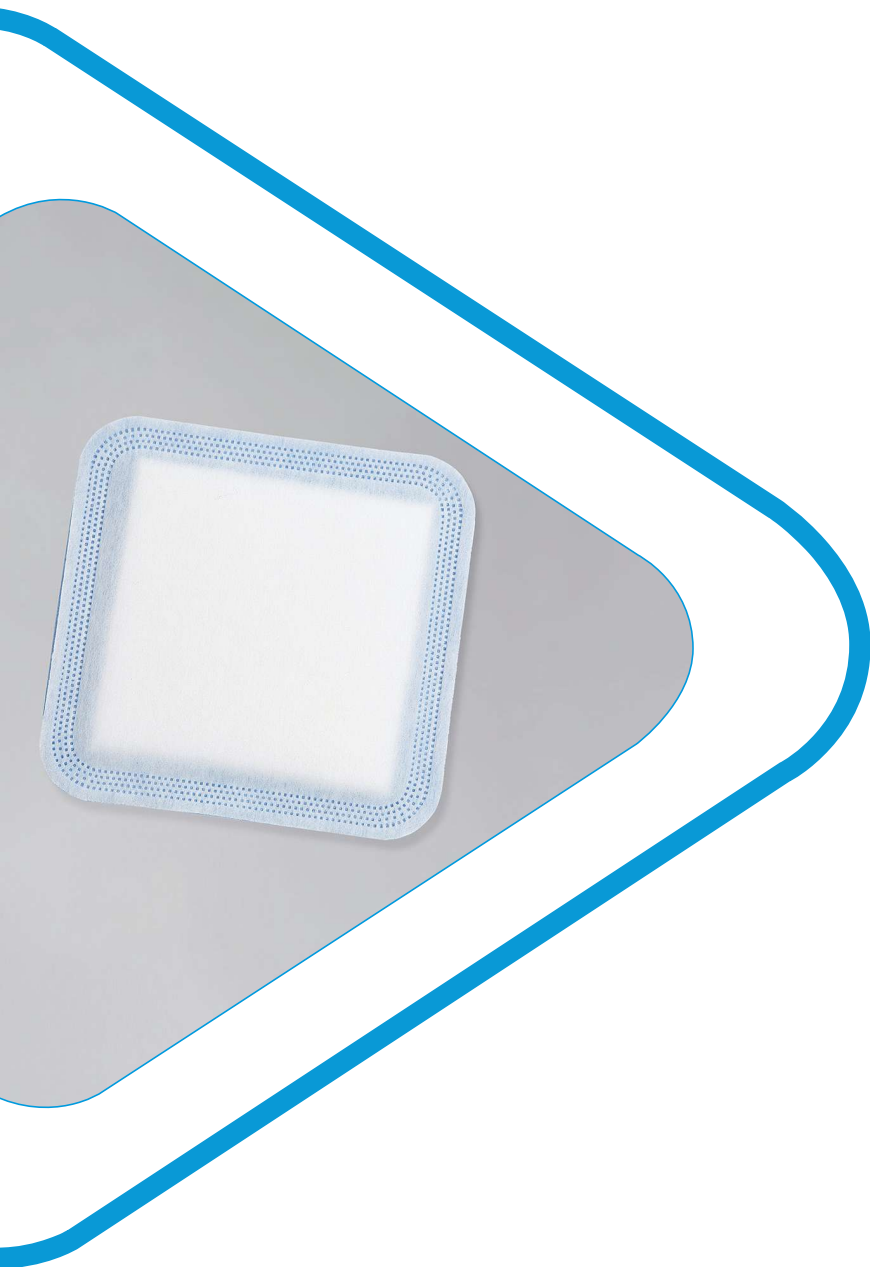

B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE


| SUPERABSORBENT





SUPERABSORBENT

Haute absorption et rétention de l'exsudat – même sous compression.

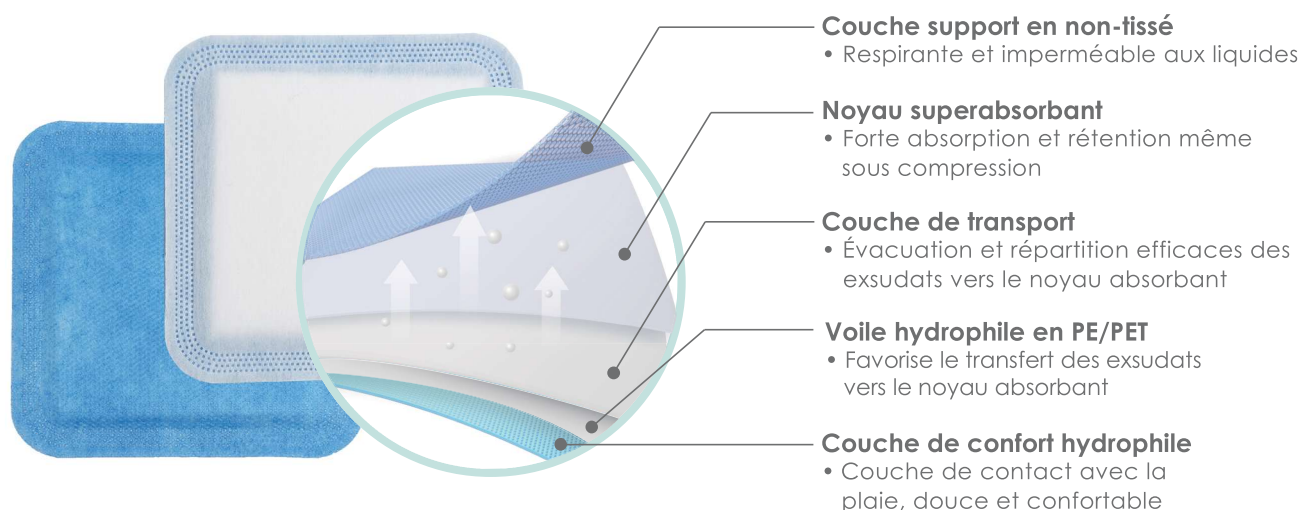

Le pansement B-WISE SUPERABSORBENT est conçu pour gérer de grandes quantités d'exsudat. Le liquide est absorbé et retenu dans le noyau superabsorbant – même sous compression. Les MMPs (métalloprotéinases matricielles) et les bactéries sont liés dans le noyau absorbant et, par leur réduction, contribuent à une cicatrisation efficace. Contrairement à de nombreux autres pansements superabsorbants, il peut également absorber un exsudat visqueux grâce à un noyau mixte composé de polymères superabsorbants (SAPs) et de fibres naturelles.

INDICATIONS

Aspect de la plaie:



Exsudat:
moyen – élevé




Indications:

- Ulcères diabétiques
- Ulcères de jambe (UCV, UCM, UCA)
- Ulcères de pression
- Brûlures jusqu'au 2e degré
- Troubles de cicatrisation secondaire

Codes produit

N° art.	Taille cm	pcs/boîte	MiGel Nr.
SA100100	10 x 10	10	35.05.05.03.1
SA100200	10 x 20	10	35.05.05.04.1
SA150150	15 x 15	10	35.05.05.04.1
SA200200	20 x 20	10	35.05.05.05.1
SA200300	20 x 30	10	35.05.05.06.1
SA200400	20 x 40	10	35.05.05.06.1

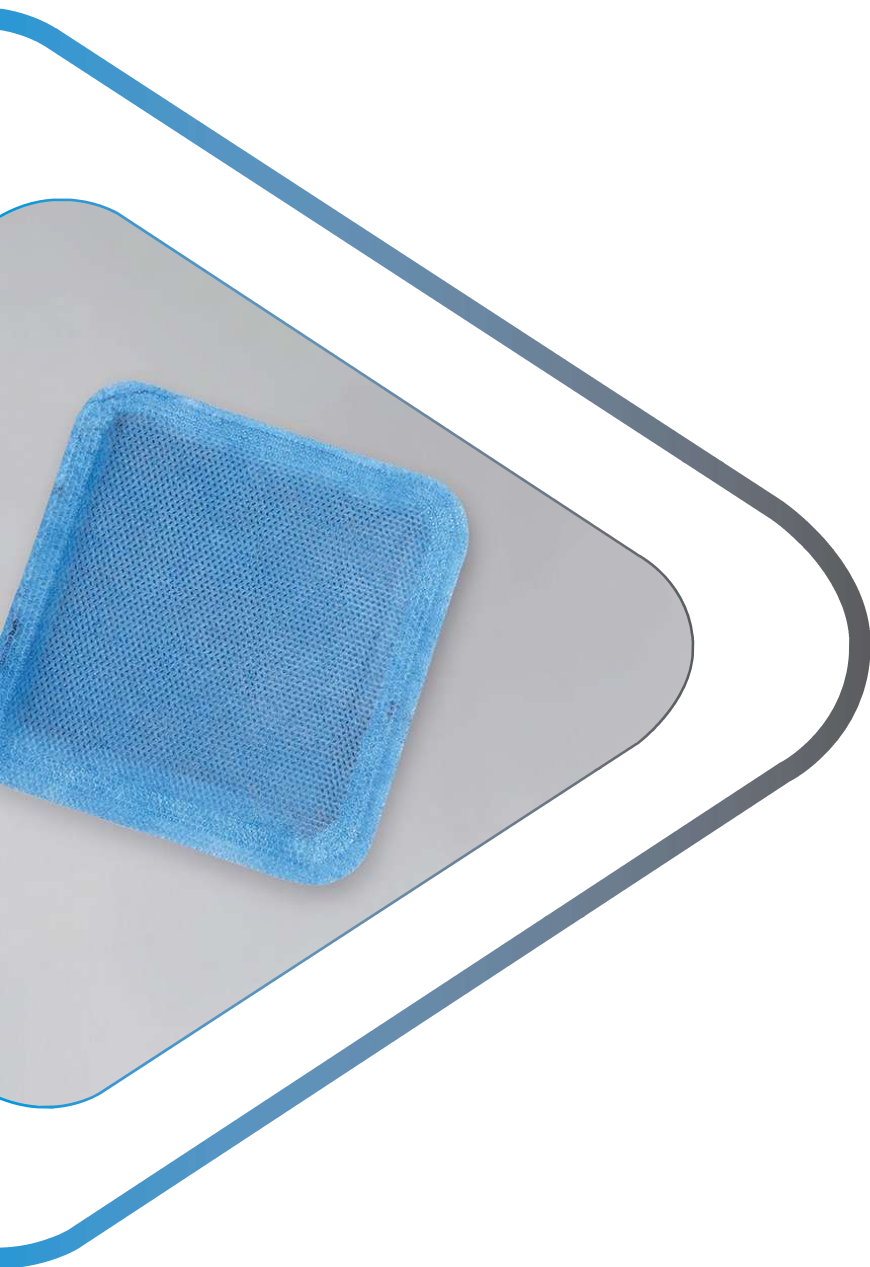


B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

CHARCOAL
SUPERABSORBENT



CHARCOAL SUPERABSORBENT

Réduction efficace des odeurs de plaie combinée à une gestion performante de l'exsudat.

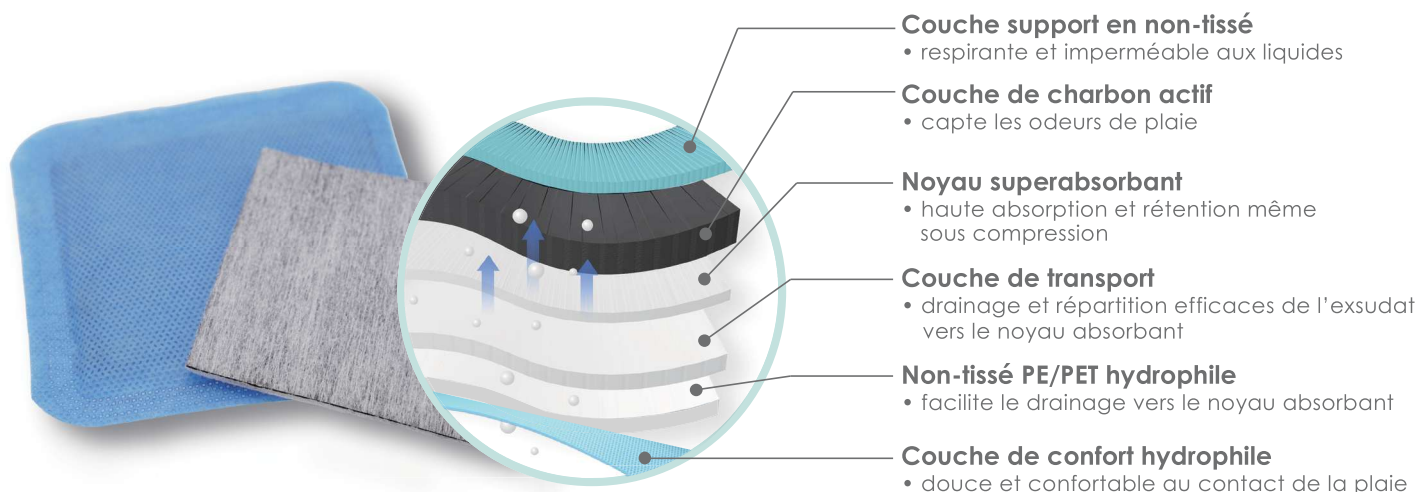

Couche support en non-tissé

- respirante et imperméable aux liquides

Couche de charbon actif

- capte les odeurs de plaie

Noyau superabsorbant

- haute absorption et rétention même sous compression

Couche de transport

- drainage et répartition efficaces de l'exsudat vers le noyau absorbant

Non-tissé PE/PET hydrophile

- facilite le drainage vers le noyau absorbant

Couche de confort hydrophile

- douce et confortable au contact de la plaie

Les odeurs de plaie affectent très négativement la qualité de vie des patients et leur réduction doit être considérée comme une mission essentielle du personnel médical ! La couche de charbon actif du pansement B-WISE Charcoal Superabsorbent cible ces odeurs et les réduit efficacement. En plus, ce pansement est conçu pour une gestion performante de l'exsudat, où de grandes quantités sont absorbées et retenues dans le noyau superabsorbant – même sous compression. Le noyau lie également les MMPs et les bactéries, contribuant ainsi à une cicatrisation efficace.

INDICATIONS

Aspect de la plaie:



Exsudat:
moyen – élevé



Indications:

- Plaies malodorantes avec exsudat moyen à élevé
- Ulcères diabétiques
- Ulcères de jambe (UCV, UCM, UCA)
- Ulcères de pression
- Brûlures jusqu'au 2e degré

Codes produit

N° art.	Taille cm	pcs/boîte	MiGel Nr.
SAC100100	10 x 10	10	35.03.01.03.1
SAC100200	10 x 20	10	35.03.01.04.1
SAC150150	15 x 15	10	35.03.01.04.1



B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

LIPO-TUL
LIPO-COLLOID NET






LIPOTUL

LIPO-COLLOID NET

Environnement humide de cicatrisation et retrait atraumatique.
De grands pores assurent une gestion efficace de l'exsudat visqueux.

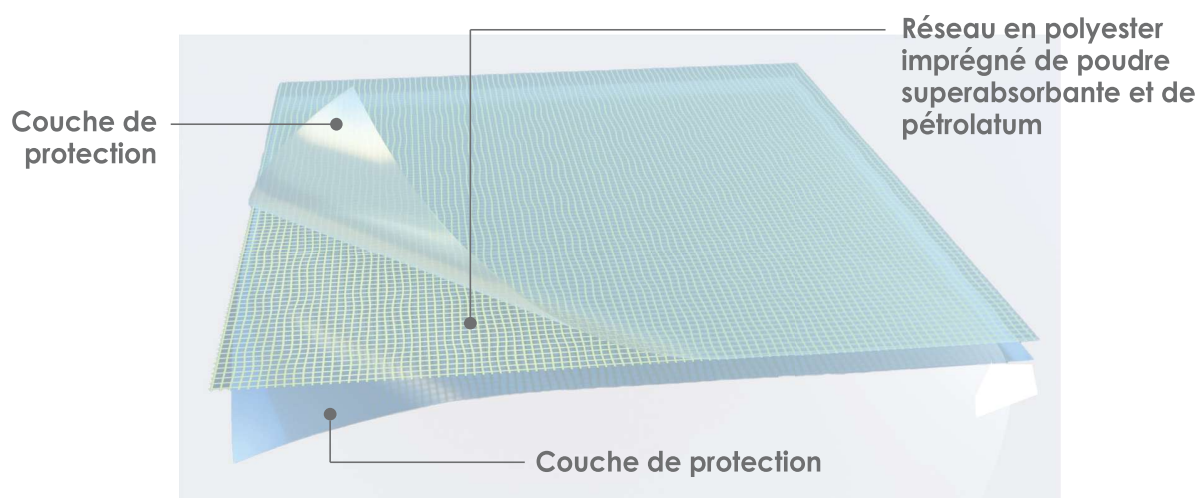


B-WISE LIPOTUL est un pansement non adhérent constitué d'un filet en polyester imprégné d'une matrice de poudre superabsorbante (CMC), de paraffine douce et de polymères cohésifs. Les particules superabsorbantes gélifient lors de l'absorption de l'exsudat, créant un environnement humide favorable à la cicatrisation. Les lipides contenus (paraffine douce et huile de paraffine) assurent un changement de pansement indolore et atraumatique.

INDICATIONS

Convient pour le traitement des plaies où l'adhérence du pansement au tissu sous-jacent doit être évitée. Souvent utilisé en combinaison avec des pansements absorbants. Applications typiques : déchirures cutanées, abrasions, excisions chirurgicales, brûlures du 1er et 2e degré, formation de cloques, plaies déchirées, ulcères de jambe et de pression, ulcères diabétiques.

Codes produit

N° art.	Taille cm	pcs/boîte	MiGel Nr.
LT050050	5 x 5	10	35.05.08.01.1
LT100100	10 x 10	10	35.05.08.02.1
LT100200	10 x 20	10	35.05.08.03.1
LT150150	15 x 15	10	35.05.08.03.1

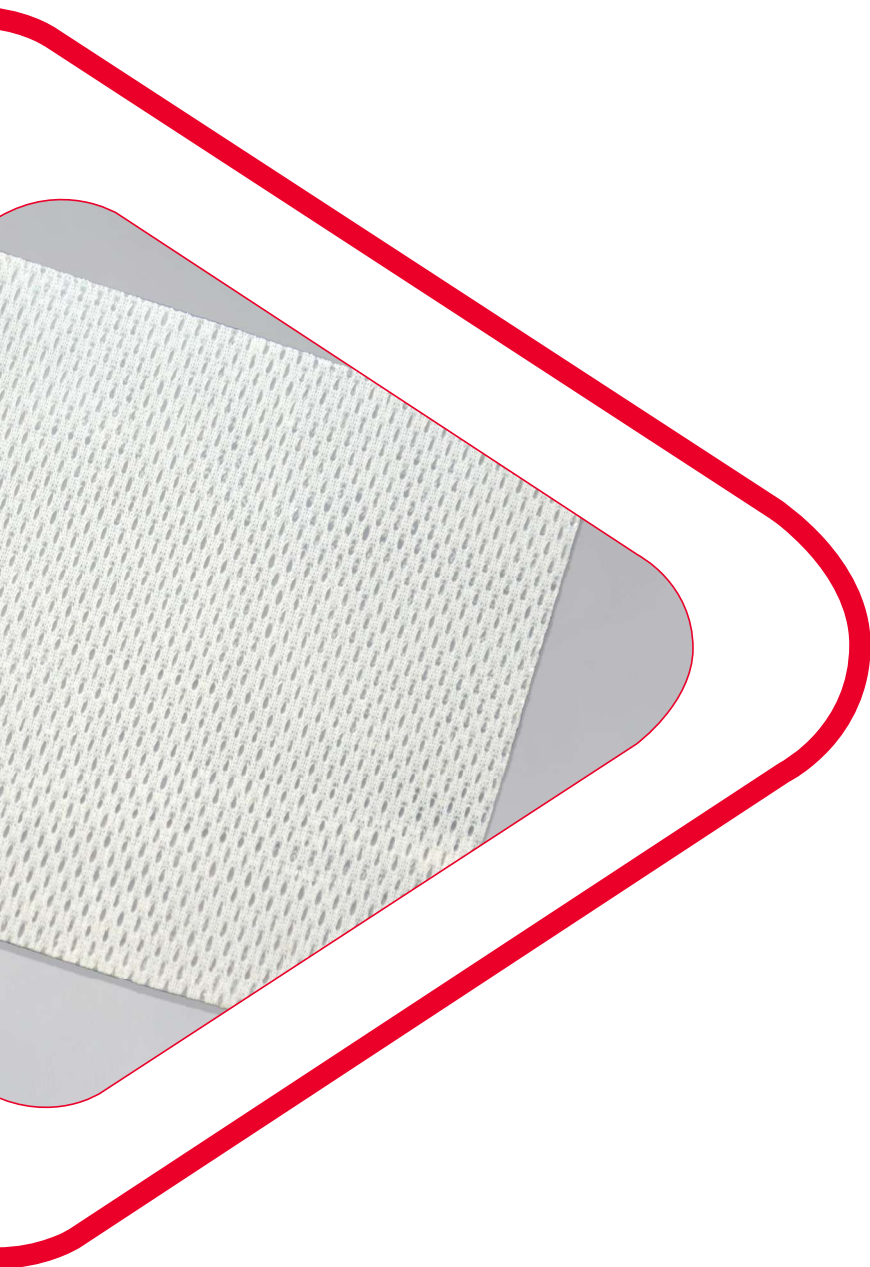


B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

SILICONE
INTERFACE
(1-SIDED)



SILICONE INTERFACE (1-SIDED)

Atraumatic soft silicone wound contact layer. Bigger pore size for better management of high viscosity exudate.

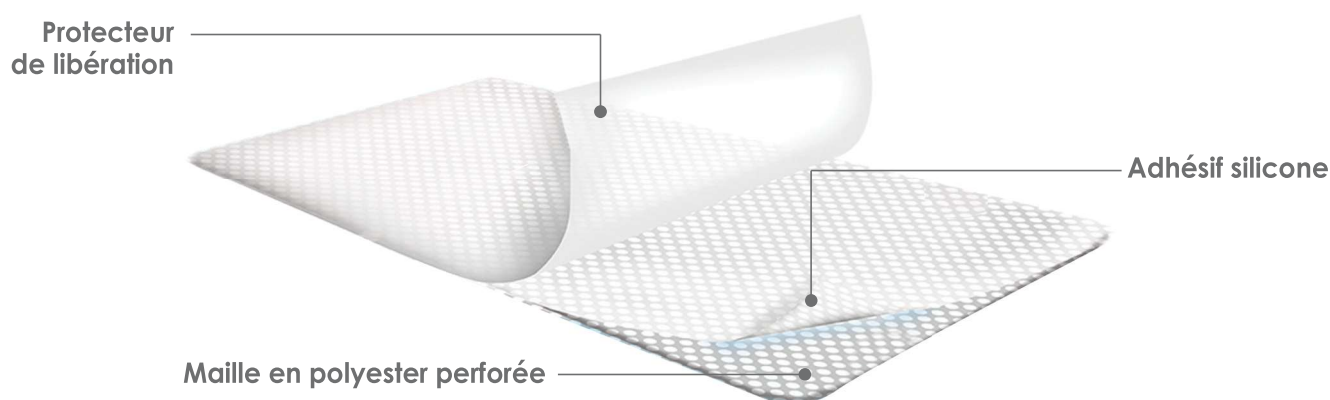

B-WISE SILICONE INTERFACE (revêtu d'un seul côté) est une grille de contact avec la plaie recouverte de silicone souple. Le revêtement en silicone du côté plaie est légèrement adhésif, ce qui facilite l'application du pansement. Cette adhérence douce protège également la peau périlésionnelle contre l'écoulement latéral de l'exsudat. De larges pores garantissent une gestion efficace de l'exsudat visqueux, tandis que le silicone souple permet de retirer le pansement sans douleur ni traumatisme pour le nouveau tissu fragile.

INDICATIONS

Convient pour le traitement des plaies où l'adhérence du pansement au tissu sous-jacent doit être évitée. Souvent utilisé en combinaison avec des pansements absorbants. Applications typiques : déchirures cutanées, abrasions, excisions chirurgicales, brûlures superficielles, formation de cloques, plaies déchirées, greffes cutanées partielles ou totales, ulcères de jambe et de pression, ulcères diabétiques, lésions cutanées après radiothérapie ou corticothérapie.

Codes produit

N° art.	Taille cm	pcs/boîte	MiGel Nr.
SL050075	5 x 7.5	10	35.05.08.01.1
SL075100	7.5 x 10	10	35.05.08.02.1
SL100180	10 x 18	10	35.05.08.03.1
SL150200	15 x 20	10	35.05.08.04.1

Your Local Alliance Partner:



LagoMedical GmbH

Coordonnées

LAGOMEDICAL GMBH
Seepark 1
9422 Staad
Suisse

Tél: +41 81 515 29 40
office@lagomedical.ch
www.lagomedical.ch

Nous sommes heureux de vous conseiller
et nous réjouissons de vos questions !

Be Wise!



Visit: bwisewoundcare.com